

ZESTAW DO POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU PO PORONIENIU

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

1. Plastikowy jałowy pojemnik – 1 szt.
2. Sól fizjologiczna - 10 ml
3. Dokumenty do wypełnienia

Zlecenie wykonania badania wraz z deklaracją świadomej zgody – 1szt (w razie konieczności dokumenty można pobrać ze strony internetowej GYNCENTRUM)

Cały zestaw należy skompletować samodzielnie, nabywając w aptece lub u lekarza prowadzącego.

Jest to badanie płatne, nierefundowane przez NFZ.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁEM:

POBRANIE MATERIAŁU:


- Jeśli poronienie nastąpiło w szpitalu: przed pobraniem należy wypełnić zlecenie badania (czytelnie, łącznie z podpisem lekarza).
- Pacjent musi podpisać zgodę na wykonanie badania (na odwrocie skierowania).

Uwaga! Wszystkie poniższe czynności należy wykonywać w jednorazowych rękawiczkach!

1. Jednorazowy pojemnik powinien zostać opatrzony danymi identyfikującymi pacjentkę (imię i nazwisko, PESEL, kod kreskowy lub data urodzenia). Pojemnik jest jałowy - nie należy otwierać go bez potrzeby!
2. Założyć jednorazowe rękawiczki ochronne i odkręcić pojemnik.
3. Materiał poronny umieścić w jałowym pojemniku z solą fizjologiczną samodzielnie lub przez personel medyczny. Objętość soli powinna pozwolić na całkowite zanurzenie materiału biologicznego, zabezpieczając go przed degradacją i wysychaniem.
4. Pojemnik z pobranym materiałem należy szczelnie zakręcić i umieścić w woreczku strunowym.
5. Wypełnione zlecenie na badanie dołączyć do materiału w odrębnym woreczku strunowym.
6. Spakować całość do kolejnego zbiorczego opakowania/ woreczka strunowego.

TRANSPORT MATERIAŁU DO LABORATORIUM:

- Materiał należy dostarczyć jak najszybciej po pobraniu (do 48h).
- Po pobraniu przechowywać w temp. 2-8 °C, nie zamrażać.
- Transportować w temperaturze pokojowej, nie zamrażać.

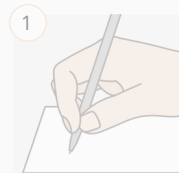

Wypełnić czytelnie skierowanie oraz uzupełnić deklarację świadomej zgody pacjenta. Skierowanie umieścić w jednym z woreczków strunowych.



Pojemnik okleić kodem lub opisać danymi: imię, nazwisko, nr PESEL.



Zachować zasady aseptyki – zdezynfekować ręce oraz nałożyć jednorazowe rękawiczki.



Jałowy pojemnik odkręcić i uzupełnić dołączoną w zestawie solą fizjologiczną (10-30 ml), tak aby całkowicie zanurzyć materiał.



Pobrać fragment kosmówki (15-20mg) i umieścić w pojemniku wcześniej wypełnionym solą fizjologiczną.



Pojemnik z materiałem szczelnie zakręcić, owinąć ligniną oraz umieścić w drugim woreczku strunowym.



Oba woreczki (z materiałem oraz ze skierowaniem) umieścić w pudełku.



Materiał dostarczyć do laboratorium GYNCENTRUM.

MIEJSCE I GODZINY DOSTARCZENIA MATERIAŁU DO BADANIA

ul. Mehoffera 10
31-322 **Kraków**
pn, śr: 07:00-19:00
wto, pt: 07:00-15:00
czw: 07:00-17:00

ul. Kozielowskiego 9
42-200 **Częstochowa**
pn, wt: 07:00-20:00
śr: 07:00-15:00
czw: 07:00-11:00

ul. Zana 32A
20-601 **Lublin**
pn, wt: 07:00-17:00
śr: 07:00-19:00
czw: 07:00-11:00

ul. Rondo ONZ 1
00-124 **Warszawa**
pn, śr: 07:00-19:00
wto, pt: 07:00-15:00
czw: 07:00-17:00

ul. Żelazna 1
40-155 **Katowice**
pn: 07:00-18:00
pt: 07:00-15:00
sob: 07:00-12:00

ul. Komorowicka 140
43-300 **Bielsko - Biała**
pn: 7 - 18:00
wto, śr: 07:00-19:00
czw: 07:00-11:00

ul. Głogowska 151
60-266 **Poznań**
pn: 8 - 18:00
wto, śr: 08:00-16:00
czw: 08:00-11:00

Plac Orłąt Lwowskich 1
53-605 **Wrocław**
pn - śr: 08:00-17:00
czw: 08:00-11:00